



DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE BOSCAROL

# CTS CHILDREN TRANSPORT SYSTEM

ISTRUZIONI OPERATIVE



Dispositivi medici conformi al Regolamento  
Europeo sui dispositivi medici 745/2017



PRODOTTO DA:

OSCAR BOSCAROL SRL  
Via Enzo Ferrari 29  
39100 Bolzano  
ITALIA



Tel. +39 0471 932893

Fax: +39 02 57760140

[info@boscarol.it](mailto:info@boscarol.it)

[www.boscarol.it](http://www.boscarol.it)

*Informazioni sul produttore e sul dispositivo medico:*

- La Oscar Boscarol applica un sistema di gestione della qualità secondo gli standard internazionali ISO 13485 e ISO 9001
- I dispositivi medici della categoria "Immobilizzazione" (in tutte le loro configurazioni) sono conformi al Regolamento Europeo MDR 2017/745 e recano la marcatura CE in conformità alla classe di rischio I (vedi Allegato VIII del Regolamento)
- Il dispositivo medico soddisfa i requisiti di sicurezza e performance (GSPR) descritti nell'allegato I del Regolamento Europeo 2017/745

*Informazioni su queste istruzioni operative:*

- Il presente documento contiene informazioni importanti per un uso sicuro, efficace e conforme del dispositivo medico
- Utilizzare le informazioni riportate per formare gli utenti e confermare la loro formazione
- Non è consentito modificare (anche parzialmente) il presente manuale. Solo il produttore del dispositivo può apportarvi modifiche
- Queste istruzioni devono sempre accompagnare il dispositivo. Si consiglia di utilizzare la versione elettronica e renderla disponibile su PDA, tablet e telefoni cellulari degli operatori

Queste istruzioni operative sono valide per i seguenti dispositivi:

IMM120050		
-----------	--	--



## INDICE

<b>0.</b>	<b>SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E PITTOGRAMMI .....</b>	<b>4</b>
0.1.	Simboli utilizzati in queste istruzioni operative per richiamare l'attenzione del lettore .....	4
0.2.	Simboli utilizzati sul dispositivo.....	4
<b>1.</b>	<b>DESTINAZIONE D'USO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>AVVERTENZE, PRECAUZIONI E IMPORTANTI INFORMAZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>IMPORTANTI INFORMAZIONI DA CONOSCERE PRIMA DELL'USO .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>CONTROINDICAZIONI (NON UTILIZZARE PER) .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>EFFETTI COLLATERALI (POSSIBILI DURANTE L'UTILIZZO).....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>CTS BOSCAROL.....</b>	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b>COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO.....</b>	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>RIUTILIZZO DEL CTS BOSCAROL.....</b>	<b>8</b>
<b>9.</b>	<b>CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO .....</b>	<b>9</b>
<b>10.</b>	<b>DEMOLIZIONE DEL DISPOSITIVO .....</b>	<b>9</b>
<b>11.</b>	<b>SERVIZIO TECNICO E PARTI DI RICAMBIO.....</b>	<b>9</b>
<b>12.</b>	<b>DATI TECNICI E CONFORMITÀ PER I CTS BOSCAROL.....</b>	<b>9</b>
<b>13.</b>	<b>GARANZIA.....</b>	<b>10</b>

***Nota: a partire da questo momento si utilizzerà la parola CTS per indicare e riferirsi al dispositivo medico***



## 0. SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E PITTOGRAMMI

### 0.1. Simboli utilizzati in queste istruzioni operative per richiamare l'attenzione del lettore

	Pericolo: importanti informazioni di sicurezza sull'uso corretto del CTS per prevenire lesioni all'operatore o al paziente e/o danni al dispositivo stesso
	Avvertenze: informazioni che richiedono speciale attenzione
	Note o informazioni per un utilizzo corretto e per prevenire danni al dispositivo o ad altri. Attivare le misure di prevenzione corrette
1.	Lista di azioni da eseguire: seguirle passo per passo
	Queste istruzioni operative
	Servizio di manutenzione richiesto (rivolgersi al costruttore e/o ai suoi centri di assistenza autorizzati)


### 0.2. Simboli utilizzati sul dispositivo

	Utilizzare il CTS solo entro l'intervallo di temperatura indicato. L'utilizzo del CTS al di fuori di questi limiti potrebbe diminuirne le prestazioni funzionali e danneggiarlo
	Limiti di utilizzo riferiti alla umidità
	Leggere attentamente e completamente queste istruzioni operative
	Indica la necessità dell'utilizzatore di consultare queste istruzioni operative per la presenza di informazioni, come avvertenze e precauzioni che non possono essere visualizzate sul dispositivo medico in questione
	Marchio CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745 per dispositivi medici in classe I
	Produttore
	Numero di ordine (codice dispositivo)
	Si prega di leggere le istruzioni operative in altre lingue disponibili sul sito web indicato
	Indica che il CTS è un dispositivo medico
 (01)08052400880753 (11)210408 (20)00 (10)12100	Esempio di codice UDI-DI e UDI-PI del dispositivo medico: (01) Identificativo del produttore e del dispositivo associato (11) Data di produzione (20) Variante di prodotto (10) Numero di lotto

## 1. DESTINAZIONE D'USO

<b>Nome del dispositivo</b>	CTS – Children Transport System Boscarol
<b>Uso primario</b>	Dispositivo medico destinato all'immobilizzazione di un neonato o bambino ai fini del sollevamento e trasporto in sicurezza su altri dispositivi di trasporto
<b>Altri utilizzi</b>	Può essere utilizzato anche su pazienti sani al puro scopo di proteggerli
<b>Scopo medico</b>	Immobilizzazione e trasporto del paziente immobilizzato in sicurezza. Il dispositivo consente l'immobilizzazione di un paziente dotato di collare cervicale





<b>Parte di applicazione nel corpo umano</b>	Intero corpo del paziente
<b>Tipo di pazienti</b>	Bambini e neonati fino a 15 Kg
<b>Tempo di applicazione sullo stesso paziente</b>	Uso "a breve termine" (massimo 30 giorni di utilizzo consecutivo)
 <b>Informazioni sull'utilizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il CTS Boscarol può essere utilizzato su tutti i tipi di bambini e neonati (fino a un peso massimo di 15 kg di peso)</li> <li>• Può essere utilizzato in contemporanea con il collare cervicale e altri dispositivi medici connessi</li> <li>• L'immobilizzazione e trasporto di un paziente deve essere sempre a cura di soccorritori professionali, addestrati e a conoscenza delle tecnologie specifiche di immobilizzazione e trasporto dei pazienti</li> <li>• Si consiglia l'utilizzo del CTS con almeno due soccorritori addestrati</li> </ul>

## 2. AVVERTENZE, PRECAUZIONI E IMPORTANTI INFORMAZIONI

	<p><b>Leggere attentamente</b></p> <p>Queste istruzioni operative sono state preparate utilizzando un linguaggio semplice e di facile comprensione. In caso di difficoltà nell'interpretare quanto scritto, contattare il produttore per ulteriori chiarimenti.</p> <p>  <b>Phone +39 0471 93 28 93</b>  <b>info@boscarol.it</b> </p>
 <b>LATTICE</b>	<p>I CTS Boscarol sono costruiti senza l'uso di lattice. I materiali impiegati sono privi di lattice, tuttavia, non è escluso che durante tutta la catena di produzione possano essere venuti in contatto con lattice</p>
 <b>DISPOSITIVO CONTAMINATO</b>	<p>Avvertenza in caso di contaminazione del dispositivo: l'immobilizzazione di un bambino/neonato sul CTS può essere fonte di contaminazione. Per questa ragione dopo ogni utilizzo il dispositivo deve essere pulito e disinfettato per eliminare qualsiasi rischio residuo. Seguire le istruzioni presenti in questo manuale di utilizzo.</p> <p>In caso di dubbi prima di inviare un dispositivo per la riparazione, contattare il servizio tecnico Boscarol inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:info@boscarol.it">info@boscarol.it</a> o chiamando il numero di telefono +39 0471 932893</p>

## 3. IMPORTANTI INFORMAZIONI DA CONOSCERE PRIMA DELL'USO

<p>Il CTS Boscarol è stato progettato e testato per essere conforme ai requisiti imposti dal Regolamento Europeo sui dispositivi medici 745/2017. Il CTS Boscarol è un dispositivo medico di classe di rischio I</p>	
	<p><b>Qualora l'utilizzatore o il paziente venga a conoscenza di un pericolo utilizzativo, di un effetto collaterale, di un incidente causato dal dispositivo oppure di una criticità (operativa e costruttiva) non trattata nelle presenti istruzioni per l'utilizzo deve segnalarlo immediatamente al produttore all'indirizzo mail: <a href="mailto:raq@boscarol.it">raq@boscarol.it</a></b></p>
 <b>ISPEZIONE DI SICUREZZA PERIODICA</b>	<p><b>Manutenzione preventiva e ispezione periodica di sicurezza:</b></p> <p>Il dispositivo CTS Boscarol deve essere controllato periodicamente (si consiglia una verifica funzionale completa almeno una volta alla settimana) specialmente sulle parti amovibili e sulle cinghie di fissaggio. In caso di guasto è necessario rivolgersi al produttore o sostituirlo</p>



 <b>DURATA IN VITA</b>	<p>Il CTS Boscarol ha una durata in vita pari a <b>5 anni</b> dalla data di fabbricazione se conservato e utilizzato secondo quanto previsto da queste istruzioni d'utilizzo</p>
<b>Responsabilità degli operatori/utilizzatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prendere dovute precauzioni nel caso di contatto diretto del dispositivo con il corpo del bambino/neonato interponendo appositi teli sterili (biocompatibilità)</b></li> <li>• Il CTS Boscarol è progettato per il servizio sanitario di emergenza e deve quindi essere sempre pronto all'uso, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione</li> <li>• Sostituirlo immediatamente qualora siano presenti evidenti rotture o cedimenti alla struttura, alle cinghie di fissaggio e alle cerniere. Il CTS deve essere conservato in un luogo inaccessibile ai bambini per evitare possa soffocare</li> <li>• Non lasciare mai il paziente da solo dopo averlo immobilizzato. Deve essere sempre assistito propriamente</li> <li>• Smaltire gli imballaggi in conformità con le normative vigenti e assicurarsi che siano fuori dalla portata dei bambini. Le cinghie sono da considerarsi un possibile giocattolo pericoloso per i bambini e per tale ragione non devono mai essere lasciate alla loro portata</li> <li>• Manomissioni, alterazioni e modifiche del dispositivo non sono ammesse senza il consenso del produttore</li> <li>• Gli operatori devono essere addestrati e a conoscenza delle norme e disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro (utilizzo dei DPI)</li> <li>• Soccorritori non addestrati propriamente all'utilizzo del CTS possono creare ferite e danni al paziente oltre che a sé stessi. L'applicazione del dispositivo prevede sempre la massima cooperazione all'interno del gruppo di soccorso</li> </ul>

#### 4. CONTROINDICAZIONI (NON UTILIZZARE PER)


 <b>CONTROINDICAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contatto diretto della cute del paziente (lesa o integra) con il dispositivo. È obbligatorio interporre sempre un telo sterile per garantire l'isolamento dai materiali del dispositivo</li> <li>• Non applicare il CTS qualora il neonato o bambino abbia la sospetta frattura della colonna spinale o della base cranica</li> <li>• Non inserire il corpo del bambino/neonato a testa in giù o lateralmente per evitare soffocamenti</li> <li>• Non utilizzare il dispositivo se le cinghie di fissaggio non sono assicurate al paziente</li> </ul>
------------------------------	--

#### 5. EFFETTI COLLATERALI (POSSIBILI DURANTE L'UTILIZZO)

 <b>EFFETTI COLLATERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenomeni di irritazione e reattività cutanea a causa del contatto diretto del paziente con il tessuto sintetico o le cinghie di fissaggio</li> <li>• Sindrome da soffocamento</li> <li>• Coliche (tipiche nei bambini/neonati)</li> <li>• Convulsioni</li> </ul>
--------------------------------	---

#### 6. CTS BOSCAROL

Il CTS Boscarol è commercializzato "pronto all'uso" ed è completo di tutte le parti funzionali. Al ricevimento va verificato ed eventualmente contestato al produttore la presenza di problemi inerenti all'utilizzo o alla mancanza di alcune parti previste. I CTS non prevedono accessori o parti di ricambio.

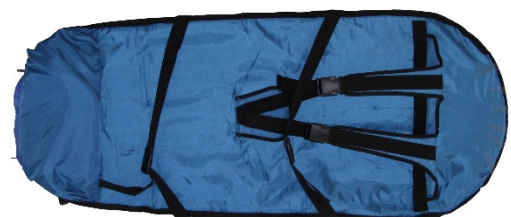

IMM120050 CTS Boscarol (Children Transport System)





## 7. COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO



Il dispositivo medico CTS Boscarol è realizzato con tessuti in nylon cuciti e disposti in modo tale da evitare danni utilizzativi al paziente. Il corpo del dispositivo (1 nella figura sopra) è accessibile grazie a una cerniera posta a lato che si apre a libro.

Le cinghie (particolare 2 nella figura sopra) sono state create per consentire il fissaggio del dispositivo su un materasso a depressione o una barella (vedi foto a lato 4).

Una borsa di custodia consente di stoccare e conservare il dispositivo nell'ambulanza



### Come utilizzare il CTS Boscarol

Stendere il CTS su un piano stabile e possibilmente pulito. Il dispositivo non è costituito da un supporto inferiore rigido e il tessuto può essere danneggiato da oggetti o detriti (ad esempio del manto stradale).

Stendere le cinghie di fissaggio alla barella o a un altro dispositivo per il trasporto.

Aprire il dispositivo grazie alle cerniere di cui è dotato e disconnettere le due cinghie centrali. Sollevarle completamente e apporre sul fondo del dispositivo un telino sterile che ha due funzioni specifiche: isolare il bambino/neonato dal tessuto sintetico di cui è composto il dispositivo e trattenere eventuali perdite di liquide organici dal paziente evitando di contaminare il dispositivo e renderlo poi difficilmente riutilizzabile.

Trattandosi di pazienti piccoli o molto piccoli l'immobilizzazione della testa o degli arti può essere effettuata prima o dopo averlo adagiato sul CTS (vedi collare cervicale o steccobende).

Dopo aver adagiato il bambino/neonato sul CTS fissare le cinghie e trasferirlo sul dispositivo di trasporto, provvedendo a fissare le cinghie previste.


Non improvvisarsi mai soccorritori se non si ha esperienza, capacità e competenza. Normalmente il numero di soccorritori per queste operazioni è pari a due.



**ATTENZIONE**

Le cinghie di fissaggio del CTS alla barella o al dispositivo di trasporto sono relativamente lunghe e possono costituire un pericolo per il soccorritore e il paziente. Tenerle sotto controllo sempre per evitare possano costituire un pericolo ai movimenti del soccorritore!

Il telo da interporre tra il bambino/neonato dovrebbe essere specifico per trattenere anche i liquidi organici rilasciati durante le operazioni di soccorso e di trasporto. Nella foto di pagina seguente è indicato come predisporre il telo.

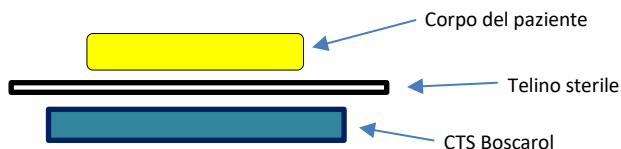

 <b>BIOCOMPATIBILITÀ</b>	<p>Il telino sterile interposto tra il CTS ed il corpo del paziente è necessario per prevenire fenomeni di irritazione e reattività cutanea a causa del contatto diretto del paziente con i tessuti sintetici. Inoltre, stabilisce una barriera termica e di contenimento del rilascio di sostanze organiche</p>
-----------------------------	--

Accertarsi sempre delle condizioni del paziente durante tutte le operazioni di immobilizzazione e durante il trasporto in ospedale o al vicino centro di soccorso. La foto a lato illustra il corretto utilizzo del dispositivo fissato su una barella di trasporto dotata di materasso a depressione.



## 8. RIUTILIZZO DEL CTS BOSCAROL

Dopo ogni utilizzo è necessario procedere con la pulizia e disinfezione del dispositivo medico. Tali operazioni assumono maggiore importanza qualora non siano note le condizioni patologiche del paziente e possano essere presenti contaminazioni dirette. L'utente deve sempre adottare misure e mezzi protettivi per tutelare la propria incolumità. Il CTS può essere lavato con acqua che non deve superare i 40° C di temperatura. Mai utilizzare spazzole abrasive metalliche o molto dure che potrebbero rovinare il tessuto. Se si utilizza una lavatrice evitare l'operazione di centrifugazione.

 <b>Idropultrici</b>	<p>Non utilizzare macchine idropultrici ad alta pressione che potrebbero danneggiare gli strati superficiali del CTS e danneggiare le fettucce in velcro e in polietilene</p>
 <b>Attenzione</b>	<p>Non tagliare o modificare la struttura e la forma dei CTS Boscarol per non danneggiarla irrimediabilmente</p>
 <b>Lavatrici</b>	<p>Non centrifugare il dispositivo se lavato in lavatrice. Non superare i 40° C di temperatura dell'acqua. Detersivi aggressivi potrebbero alterare i colori del dispositivo e danneggiarlo</p>

Eliminare in modo sicuro il telo interposto tra il CTS e il corpo del paziente.

Verificare lo stato delle cinghie, pulire le fibbie in modo accurato. Lasciare in ammollo con un detergente delicato il dispositivo in acqua tiepida non superiore ai 40° C. Pulire e rimuovere tutte le sostanze presenti. Se del caso utilizzare una spugna non abrasiva per rimuovere eventuali incrostazioni. Prima di procedere con la disinfezione rimuovere eventuali tracce di sangue e/o organiche lasciate dal paziente. Disinfettare il CTS (tutta la superficie) con prodotti idonei allo scopo (fare una prova su un lato del dispositivo per verificare non si danneggi). Non usare candeggina e spazzole di ferro, lana d'acciaio e lame di qualsiasi tipo per eliminare le incrostazioni. Disinfettanti colorati potrebbero macchiare irrimediabilmente le superfici del dispositivo stesso. Prima di riporre il dispositivo assicurarsi sia completamente asciutto per evitare si possano formare muffe.

 <b>Disinfezione</b>	<p>Rispettare sempre quanto disposto dalle disposizioni locali e regionali per quanto riguarda la validazione delle operazioni di disinfezione</p>
 <b>Sterilizzazione</b>	<p>Il CTS Boscarol <b>NON</b> può essere sterilizzato!</p>





## 9. CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO

Il CTS Boscarol può essere utilizzato e conservato nel range di temperatura compreso tra -10 e +50 °C. Con valori molto bassi o troppo alti il materiale a contatto con il paziente potrebbe diventare estremamente freddo o caldo facendo sorgere complicazioni al paziente (ipotermia e ipertermia). Inserire sempre un telo sterile di spessore opportuno e adottare tutte le misure necessarie per contenere tali effetti e limitarli al massimo.

Il CTS deve essere conservato pulito e asciutto. Deve essere periodicamente verificato per evitare possano insorgere muffe, danni dovuti alle cuciture e la funzionalità delle cinghie e delle cerniere. Se conservato in luoghi molto umidi deve essere controllato ogni mese arieggiandolo in modo da evitare la formazione di muffe o altre sostanze che potrebbero degradare il dispositivo.

## 10. DEMOLIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo può essere demolito seguendo le indicazioni nazionali e locali previste per lo smaltimento di sostanze a base di plastica e polietilene. Tutti i materiali sono conformi al Regolamento REACH e non contengono sostanze pericolose.

## 11. SERVIZIO TECNICO E PARTI DI RICAMBIO

In caso di guasto funzionale o qualora siano necessarie informazioni ausiliarie in merito alle operazioni di riutilizzo e/o conservazione e trasporto vi preghiamo di contattare il produttore al numero di telefono +39 0471 932893 oppure inviando una mail all'indirizzo [info@boscarol.it](mailto:info@boscarol.it).

## 12. DATI TECNICI E CONFORMITÀ PER I CTS BOSCAROL

Classificazione del dispositivo medico (in conformità al MDR 2017/745)	I
Basic UDI number (in conformity a MDR 2017/745)	805240088IMMGK
Specifiche tecniche	Dispositivo prodotto su disegno con materiali tecnici conformi al Regolamento REACH
Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi e solidi (IEC 529):	IP65 in assenza di abrasioni o rotture
Valutazione del rischio (documentazione tecnica)	ISO 14971:2019
Durata in vita	5 anni dalla data di fabbricazione

### Dimensioni CTS Boscarol

CTS Boscarol	134x57x5 (h) cm	Peso del dispositivo: 1,5 Kg ±5 %
--------------	-----------------	-----------------------------------

### Condizioni di conservazione e utilizzo

	Campo di temperature per trasporto, utilizzo e conservazione	-10 a 50° C (da -33,8 a 122° F)
	Range di umidità per trasporto, utilizzo e conservazione	5÷95 % U.R. n.c.
	Tenere lontano dalla luce diretta del sole	
	Per altre informazioni tecniche o inerenti all'utilizzo e conservazione del dispositivo rivolgersi al costruttore ( <a href="mailto:info@boscarol.it">info@boscarol.it</a> ).	
	Su tutte le misure dei CTS la tolleranza è di ±5 cm (dovuto agli accoppiamenti). Sulle restanti misure è pari al 5%.	



### Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità è conservata dal produttore insieme a tutti i dati di rintracciabilità applicabili ai materiali e processi produttivi. È possibile richiederla in copia al fabbricante inviando una mail all'indirizzo: [info@boscarol.it](mailto:info@boscarol.it)

### 13. GARANZIA

Oscar Boscarol garantisce il CTS (tutti i modelli) per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto dal distributore o produttore originale. L'azienda garantisce che il dispositivo sia privo di materiali difettosi e/o difetti dovuti a processi di produzione.

**La garanzia non copre: l'usura normale del dispositivo, lo scolorimento e qualsiasi altra irregolarità cosmetica che non influisca sul funzionamento dell'unità.**

Se, durante tutto il periodo di garanzia di 1 anno, il prodotto viene trovato difettoso deve essere inviato alla Oscar Boscarol S.r.l. (Ltd) con una nota che descrive il difetto. Oscar Boscarol S.r.l. (Ltd) ripara o sostituisce a sua discrezione le parti difettose e/o l'intera unità. Tutte le spese di spedizione sono a carico del cliente.

#### Condizioni di garanzia:

Per beneficiare della garanzia, deve essere compilato il modulo di registrazione presente nella documentazione di prodotto e restituito per posta, fax o e-mail, al seguente indirizzo:

**OSCAR BOSCAROL SRL V. E. Ferrari, 29 – 39100 BOLZANO, ITALY**

Fax: +39 0257760142 – E-mail: [info@boscarol.it](mailto:info@boscarol.it)

Per validare il processo di garanzia, il cliente deve fornire evidenza della seguente documentazione:

1. copia della fattura e/o della ricevuta di acquisto contenente il numero di lotto del dispositivo e la data di acquisto
2. la conferma da parte del produttore o di una persona che lo rappresenta che si tratta effettivamente di un guasto dovuto al processo di produzione o di componenti difettosi sin dal loro approvvigionamento
3. assenza di manomissioni, modifiche e/o qualcosa che non sia conforme al prodotto originale

In termini di sicurezza, affidabilità e funzionalità del CTS, Oscar Boscarol S.r.l. può essere ritenuto responsabile solo se:

1. tutte le operazioni tecniche, le riparazioni, le modifiche e i controlli previsti sono state eseguite da Oscar Boscarol S.r.l. o da un centro di assistenza autorizzato
2. il dispositivo è stato e viene utilizzato correttamente, seguendo rigorosamente le indicazioni fornite in queste istruzioni operative

Con riferimento a quanto descritto nelle presenti condizioni di garanzia, Oscar Boscarol S.r.l. non può essere ritenuta responsabile di danni accidentali diretti o indiretti, qualora siano state realizzate sul dispositivo modifiche, riparazioni, interventi tecnici non autorizzati o una qualsiasi delle sue parti siano state danneggiate per incidente e uso improprio. Sul CTS non esistono altre garanzie espresse o limitate, di commerciabilità, idoneità o d'altro genere al di fuori di quelle descritte nel presente manuale d'uso.



**NOTE A CURA DELL'UTILIZZATORE**

**TRAINING SULL'UTILIZZO E RIUTILIZZO (a cura dell'utilizzatore)**



**Emergency Medical Systems**

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano IT  
Tel. +39 0471932893 - Fax: +39 0257760140  
info@boscarol.it  
www.boscarol.it

Printed in Italy by Oscar Boscarol Srl (Ltd)  
ED01\_REV02-2021 IFU CTS – ITA  
Lingua di redazione: italiano



<https://www.boscarol.it/ita/eifu.php>

